Aplikacja zestawu do podłączenia dializy Matoset

Przykład zestawu do podłączenia dializy MA-991-ZEST-487.

1




Przed rozpoczęciem procedury należy umyć ręce (specjalista i pacjent).

2



Do wykonania procedury należy przygotować środek dezynfekcyjny, stazę (zacisk), odpowiednie kaniule oraz sety do rozpoczęcia i zakończenia procedury.

3

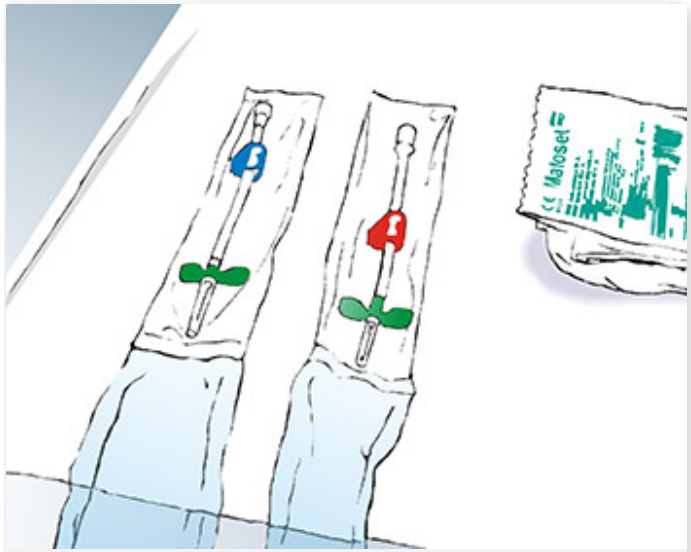

Należy otworzyć opakowania kaniul oraz set do rozpoczęcia dializy i założyć pacjentowi stazę ale bez zaciskania.


©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026

4



»

5

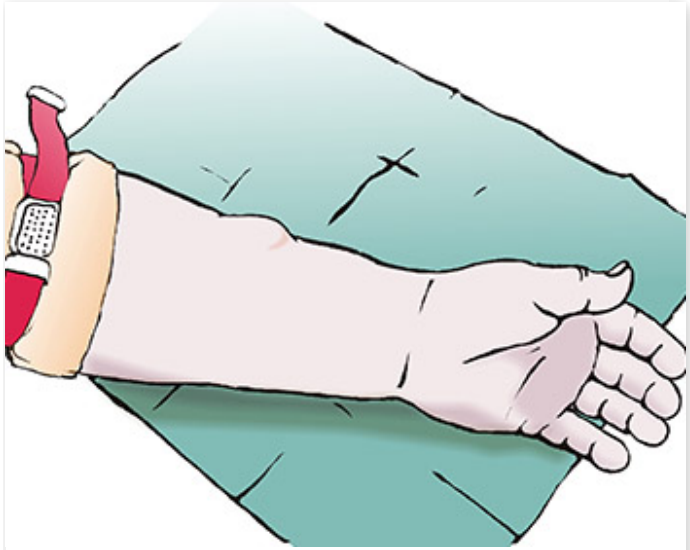

Wyjąć jałową serwetę i podłożyć pod przedramię pacjenta.


6



Następnie należy założyć rękawicę na lewą rękę, a drugą odłożyć na jałową część otwartego opakowania.

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026

7

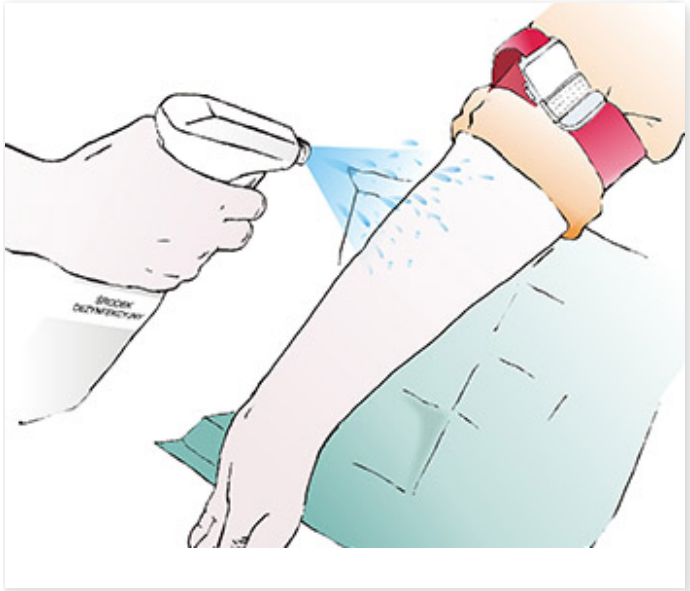

Zdezynfekować przedramię pacjenta używając płynu do dezynfekcji oraz jałowych kompresów z zestawu.

8



»


9



»

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026

10

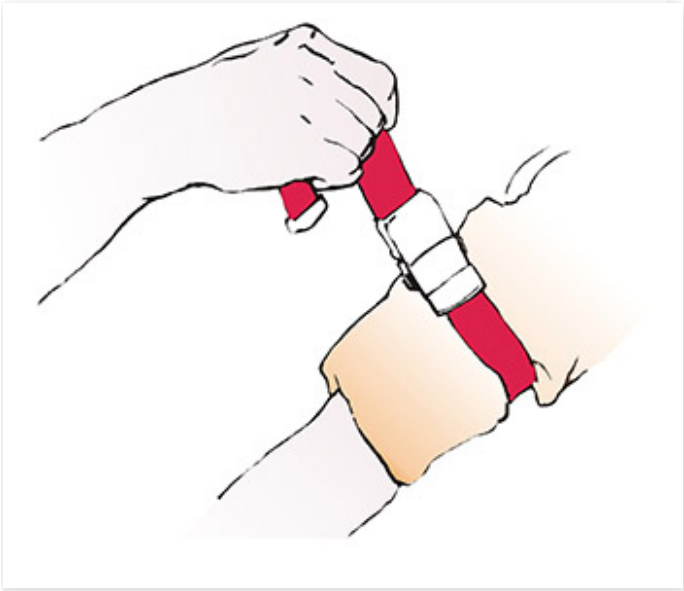


Zacisnąć stazę.

11



Założyć prawą rękawicę.


12

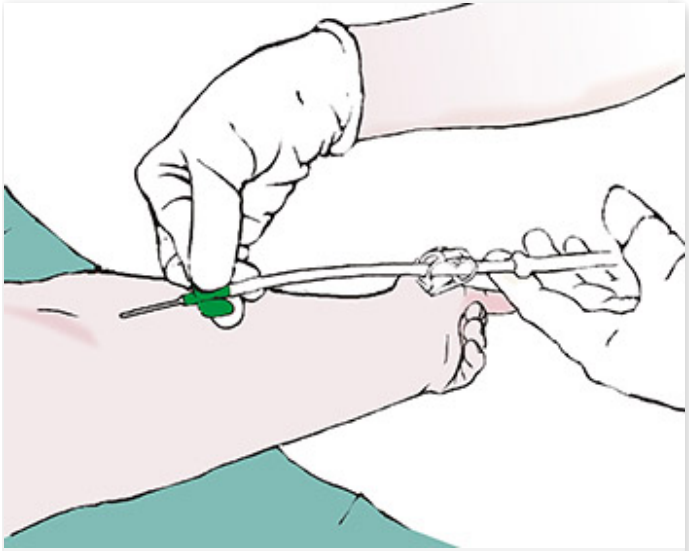

Wkłuć kaniule.


©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026

13

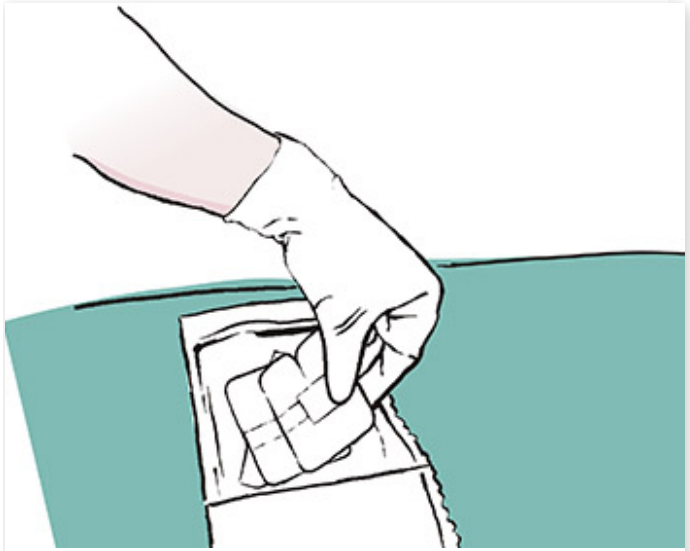


Po wkłuciu każdej kaniuli należy je umocować specjalnymi opatrunkami do mocowania kaniul.

14

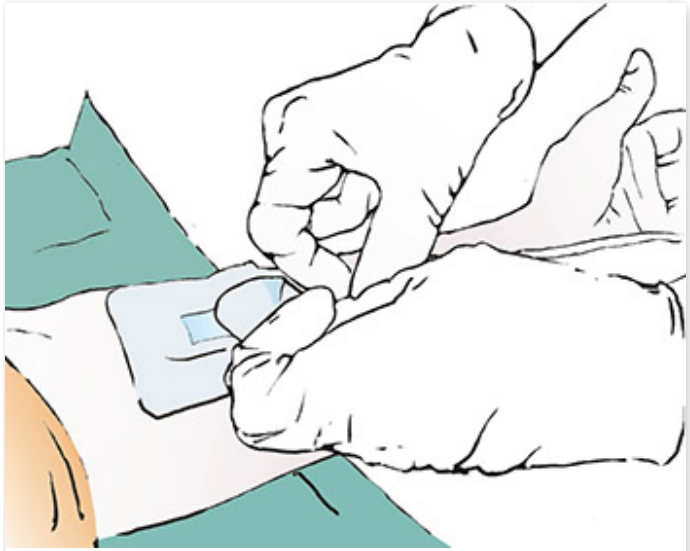

»


15

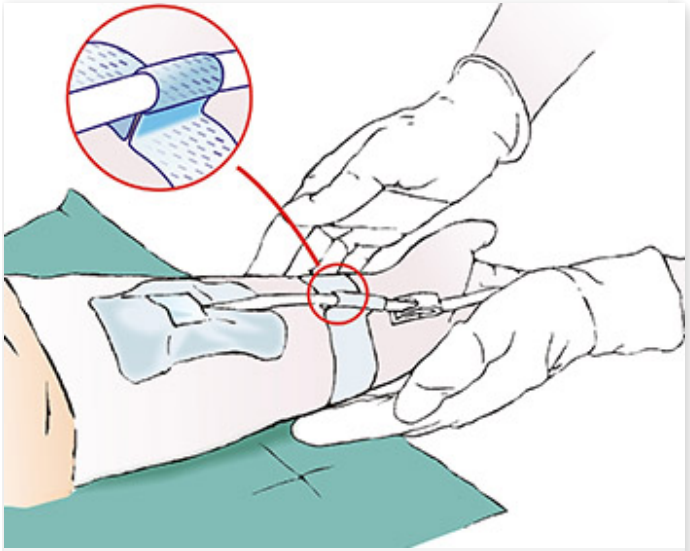

Na końcu zabezpieczyć przewody kaniul przylepcami włókninowymi.

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026

16

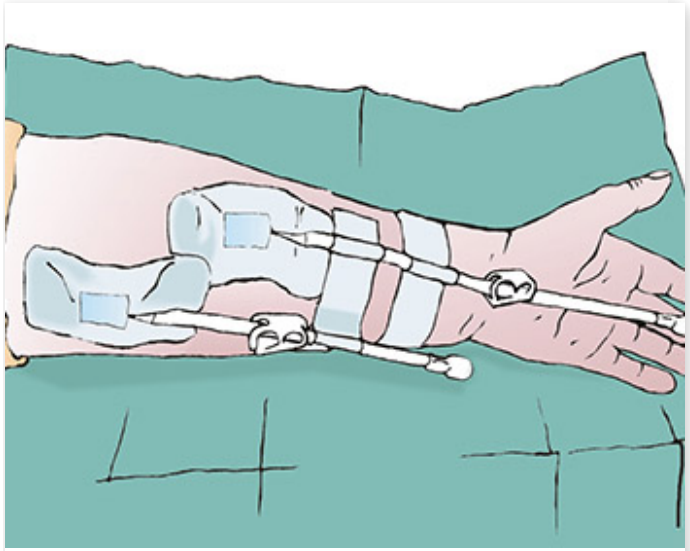

Następnie pacjenta podłącza się do „sztucznej nerki”. Dializa trwa 3-4 godziny.

©Copyright 2026 matopat.pl | Ostatnia aktualizacja: 04.11.2026