

Serwety z włókniny foliowanej Blue Comfort Matodrape Blue Comfort (także nazywany L3) to trzywarstwowy laminat.

- charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na zrywanie
- zewnętrzna warstwa od strony personelu medycznego posiada bardzo wysokie właściwości absorpcyjne oraz dużą szybkość wchłaniania, co eliminuje ryzyko ociekania płynów z powierzchni obłożenia; natomiast drapowana struktura włókniny czyni obłożenie miękkim i elastycznym, dzięki czemu jest ono układalne i bardzo dobrze dopasowuje się do ciała pacjenta i dokładnie izoluje ranę operacyjną
- środkowa warstwa foliowa zapewnia barierowość dla cieczy i mikroorganizmów
- warstwa włókniny od strony pacjenta jest przyjemna w dotyku i chłonna; przy długich zabiegach – zmniejsza ryzyko wychłodzenia pacjenta, zapobiega podrażnieniom skóry, a przy znieczuleniach miejscowych zapewnia pacjentowi komfort w zetknięciu z obłożeniem
- posiada właściwości antystatyczne
- jest biozgodny – nie wykazuje działania drażniącego, uczulającego i cytotoksycznego

Serwety z Blue Comfort mogą mieć dodatkowo np. przylepce oraz otwory w różnym kształcie.


Wyroby z laminatu są zgodne z normą PN-EN 13795.

Zastosowanie:

- oferowane indywidualnie lub jako składnik zestawów operacyjnych – umożliwiają obłożenie pacjenta w sposób zapewniający bezpieczeństwo jemu oraz personelowi medycznemu

Rozmiary i pakowanie:

- szeroka oferta rozmiarów
- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu): pakowane w torebkę papierowo-foliową po 1 szt.; dodatkowo jałowe serwety mogą być pakowane w kartonowe dyspensery umożliwiające organizację i przechowywanie wyrobów w szpitalu
- niejałowe: pakowane w worek foliowy od 10 szt. do 30 szt.

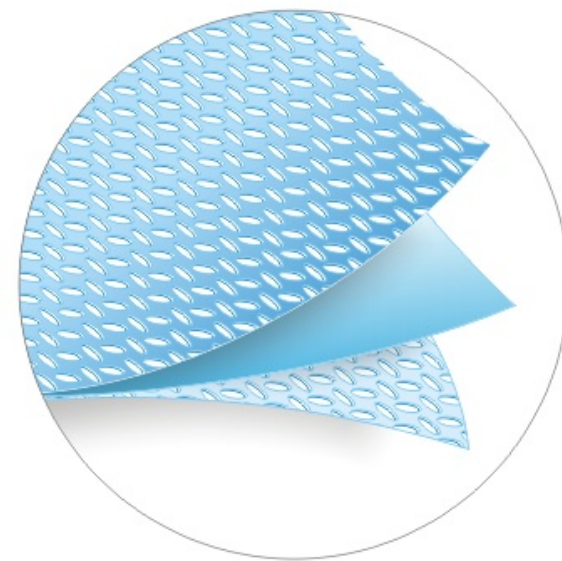

>>