

Taśmy urologiczne ultralekkie to najnowsza generacja implantów typu sling stosowanych w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet. Wytwarzane są z przezroczystej i niebieskiej, monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Niebieskie linie orientujące wzdłuż wyrobu ułatwiają jego implantację oraz zwiększają widoczność w polu operacyjnym.

Każda taśma posiada niebieskie uchwyty pozwalające na jej bezpieczne przeprowadzenie przez struktury anatomiczne pacjentki. Uchwyty te również wykonane są z przędzy polipropylenowej monofilamentowej.

Dzięki ultralekkiej masie powierzchniowej, atraumatycznym brzegom, doskonałym parametrom wytrzymałościowym, wysokiej sprężystości oraz bardzo dobrej bioinertności wyrób może być bezpiecznie i skutecznie stosowany w chirurgicznym leczeniu NM.

Zastosowanie:

- taśmy urologiczne zalecane są do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych leczenia Wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu polega na podwieszeniu cewki moczowej beznapięciową taśmą urologiczną.
- wyrób przeznaczony do implantacji następującymi metodami: Tension Free Vaginal Tape (TVT), Trans Obturator Tape (TOT) lub Tension Free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O)



Rodzaje:

- jałowe (sterylizowane tlenkiem etylenu)

Rozmiary i pakowanie:

- długości 30 cm i 45 cm
- pakowane w podwójne opakowanie papierowo-foliowe z fałdą, a następnie w kartonik po 1 szt.

Więcej szczegółów na stronie www.dallop-nm.pl

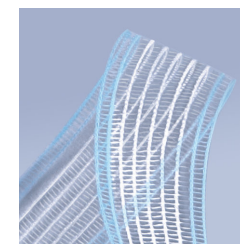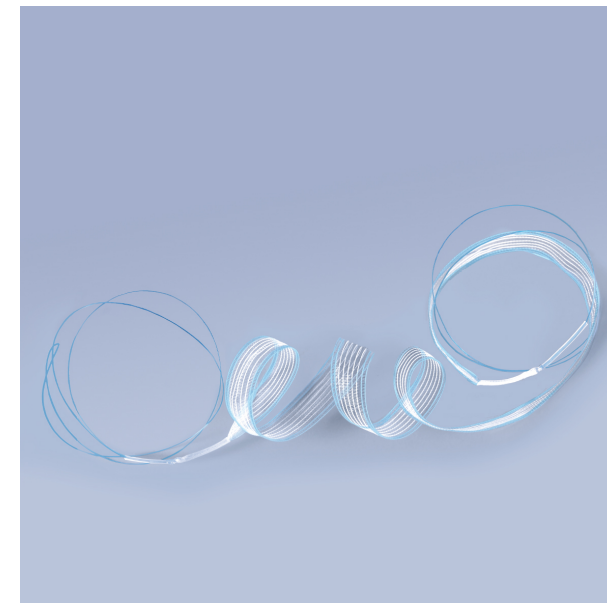

MD

Wyroby jałowe są certyfikowane przez Jednostkę Notyfikowaną PCBC SA i posiadają CE z numerem 1434

>>