

G-MESH®

SIATKA GINEKOLOGICZNA

nagroda 2019

Siatki ginekologiczne G-Mesh® zostały nagrodzone złotym medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków PRO-INVENT 2019 w Rumunii.



Siatka ginekologiczna G-Mesh® jest nieresorbowalnym, ultralekkim wyrobem siatkowym stosowanym w chirurgicznych zabiegach leczenia obniżenia narządu rodne u kobiet.

Siatka ginekologiczna G-Mesh® jest wyrobem medycznym przeznaczonym do technik rekonstrukcyjnych tzn. odtworzenia normalnej anatomii miednicy mniejszej. Przeznaczona jest do metod przezpochwowych, gdzie ramiona są mocowane z użyciem aplikatorów dobranych w zależności od potrzeb przez operatora.

Aplikatory są również dostępne w naszej ofercie.

WYRÓB G-MESH®

JEST OFEROWANY W TRZECH WARIANTACH:




Posterior 2

implantacja do tylnej ściany pochwy w celu wspierania tylnych uchyłków, tj. rectocele, enterocele



Anterior 4

implantacja do przedniej ściany pochwy w celu wspierania przednich uchyłków, tj. cystocele

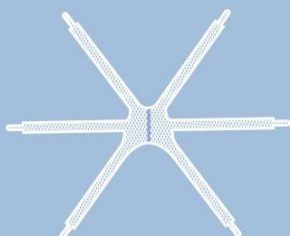

Posterior 6

implantacja do tylnej ściany pochwy w celu wspierania uchyłków tylnich tj. rectocele i enterocele, oraz uchyłków centralnych, tj. obniżenie macicy

Implanty ginekologiczne G-Mesh® charakteryzują się wysokim stopniem kompatybilności zastosowanych surowców oraz niską masą powierzchniową. Zastosowany splot jest gwarancją szybkiego wzrostu tkanek w porach siatki. Po implantacji wyrób jest stabilny wymiarowo, a jego parametry fizyczne gwarantują wysoką wygodę użytkowania, poprawiając znacząco komfort życia Pacjentki. Optymalne rozmieszczenie ramion gwarantuje stabilne, beznapięciowe podwieszenie implantu w ciele pacjentki. Kształt, ilość oraz położenie ramion odwzorowuje struktury anatomiczne w obrębie miednicy.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

kod wyrobu	typ	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-GMP2-001	Posterior 2	1 szt.	20 op.
MA-271-GMA4-001	Anterior 4	1 szt.	10 op.
MA-271-GMP6-001	Posterior 6	1 szt.	10 op.